

## CAMICE CHIRURGICO RINFORZATO - STERILE

### ITALIANO

**Nome del prodotto** Camice rinforzato SMMS monouso (Sterile)

**Codice prodotto** FGS-RF-SM50-M, FGS-RF-SM50-L, FGS-RF-SM50-XL, FGS-RF-SM50-XXL

**Taglia del prodotto** Unità cm

CODICE GIMA	21052	21053	21054	21055
CODICE FULL GUARD	FGS-RF-SM50-M	FGS-RF-SM50-L	FGS-RF-SM50-XL	FGS-RF-SM50-XXL
Dimensioni	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Lunghezza (da spalla a orlo)	120	120	130	140
Larghezza (monostrato)	140	150	150	160
Lunghezza cintura	65	65	65	69
Lunghezza manica	58	59	59	61
Deviazione	±2	±2	±2	±2

**Modello prodotto** Camice. M/L/XL/XXL

**Struttura e composizione** Il prodotto è realizzato in tessuto non tessuto SMS da 50g. È composto da una parte anteriore, una parte posteriore, maniche, lacci e polsini. È realizzato tramite taglio, saldatura al laser, con lacci, velcro, polsini, patte di sovrapposizione e chiusure.

**Uso previsto** Questo prodotto è pensato in particolare per l'isolamento generale in ambulatori, nei reparti, per l'ispezione e la pulizia delle stanze, in laboratorio, ecc. È destinato all'uso da parte degli operatori sanitari negli ospedali e nelle cliniche, per

mantenere un buon livello di igiene e contribuire al controllo delle infezioni.

**Controindicazioni** Questo prodotto è monouso e deve essere utilizzato subito dopo l'apertura della confezione. Se la confezione è danneggiata, il prodotto può essere bagnato o ammuflito. Pertanto, si raccomanda di non utilizzarlo.

**Modalità di utilizzo del prodotto** Aprire la confezione ed estrarre il prodotto scuotere delicatamente il camice, sollevare i lati del colletto, infilare le mani nelle maniche, stendere le braccia in avanti e legare le cinture.

**Conservazione** Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito, con un'umidità relativa non superiore all'80%, privo di gas corrosivi, fresco, asciutto e ben ventilato.

### Avvertenza

1. Questo prodotto è destinato allo smaltimento e non deve essere riutilizzato.
2. Questo prodotto è monouso e non deve essere condiviso con altri.
3. È vietato l'uso quando l'imballaggio o il prodotto stesso sono danneggiati.

**Avviso** Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova l'utente o il paziente.












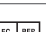

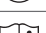
**Validità** 3 anni.

**Data di produzione** Vedere la data sulla confezione

**Data di scadenza** Vedere la data sulla confezione

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

 Codice prodotto	 Conservare al riparo dalla luce solare	 Conservare in luogo fresco ed asciutto
 Numero di lotto	 Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE	 Data di scadenza
 Fabbricante	 Data di fabbricazione	 Sterilizzato con ossido di etilene
 Limite di umidità	 Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato	 Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
 Dispositivo monouso, non riutilizzare	 Leggere le istruzioni per l'uso	

**REF** FGS-RF-SM50-M (GIMA 21052)  
 FGS-RF-SM50-L (GIMA 21053)  
 FGS-RF-SM50-XL (GIMA 21054)  
 FGS-RF-SM50-XXL (GIMA 21055)



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd  
 Yongan East Avenue,  
 Xianning Economic Development  
 Zone, Xianning City, Hubei Province, China  
 Made in China



ZOUSTECH S.L.  
 Pso. Castellana, 141 - Planta 19,  
 28046 - Madrid, Spain

Importato da / Imported by:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

**STERILE EO**

