





Panca da bagno TRANSFER

- seduta 360°
- totale 50 cm
- totale 86 cm
- seduta 39 / 32 cm
- seduta 49 - 61 cm
- braccioli 51,5 cm
- schienale 40 cm
- schienale 18 cm
- 4 kg
- 120 kg



Panca Transfer semplifica i trasferimenti in bagno di utenti con ridotta mobilità: presenta un sedile scorrevole e girevole a 360°, superando il bordo della vasca o il dislivello del piatto doccia tramite le gambe di appoggio, rivestite in gomma antiscivolo, regolabili indipendentemente. Il sedile e lo schienale in gomma sagomata, hanno una superficie antiscivolo e garantiscono il comfort dell'utilizzatore.

Vasche: utilizzo consentito con altezza del bordo non superiore a 42 cm.

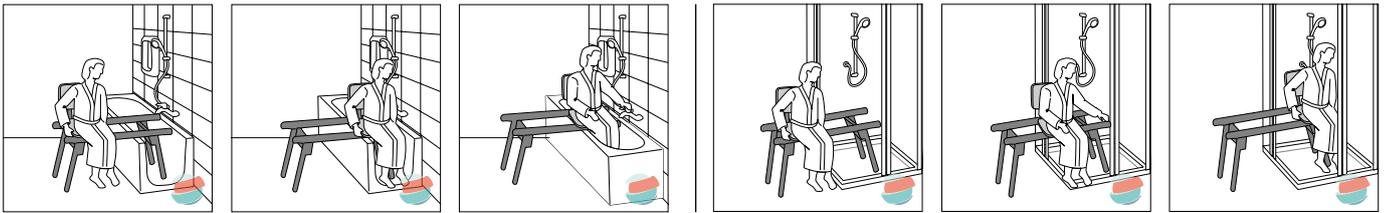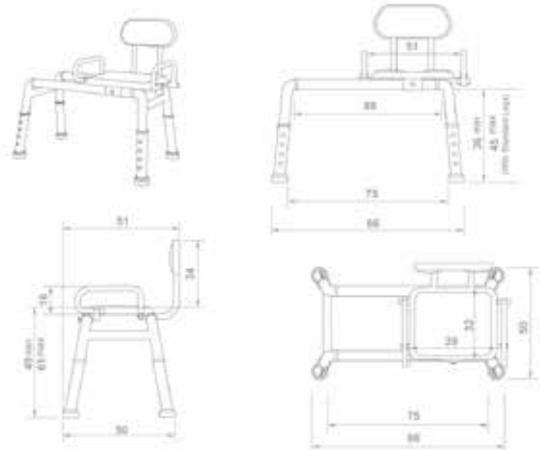

Dotata di braccioli ribaltabili, rivestiti da gomma antiscivolo e di una cintura per le gambe per il corretto posizionamento e la sicurezza dell'utente.

Codice articolo	Descrizione
BA PANTRRSCH	Panca da bagno TRANSFER - sedile scorrevole e girevole

ACCESSORI per panca da bagno TRANSFER

Gambe verticali extra

- totale 43 cm
- 10 altezze - step 1,15 cm
- 4 pz



Supporti orizzontali extralunghi

- 70,5 cm
- esterno 3 cm
- interno 2,6 cm
- 2 pz



Set di gambe per l'uso della panca TRANSFER su vasche con altezza del bordo fino a 55 cm.

Con indicatore di lunghezza: sono regolabili in dieci differenti altezze per un range totale di circa 11,5 cm. Le quattro gambe sono dotate di un puntale di appoggio antiscivolo che fornisce stabilità alla panca.

Sostituiscono i supporti di serie della panca TRANSFER, permettendone l'uso anche su vasche piuttosto larghe. Queste aste sono più lunghe di 10 cm rispetto a quelle standard: garantiscono uno spazio di manovra maggiore per adeguare ulteriormente la panca all'ambiente bagno ed alle esigenze dell'utente.

Codice articolo	Descrizione
BA SUPERLEG PT	Gambe verticali extra per panca TRANSFER - 4 pzi

Codice articolo	Descrizione
BA SUPERSUPP PT	Supporti orizzontali per panca TRANSFER extralunghi - 2 pzi

Sedia imbottita girevole da vasca TRANSFER

NOVITÀ
2024

- seduta 360° blocco ogni 45°
- appoggi 56-66,5 cm
- tra braccioli 42 cm
- seduta 40 cm
- seduta 33,5 cm
- schienale 19 cm
- braccioli 27,5 cm
- 7,4 kg
- 136 kg



Utilizzo consentito su vasche con larghezza interna da 56 a 65 cm.

Sedia da vasca con seduta girevole (con blocco di sicurezza ogni 45°). Struttura in alluminio e confort elevato grazie al rivestimento imbottito di seduta, schienale e braccioli elevabili (per favorire il trasferimento laterale dell'utente). Tra le caratteristiche della sedia girevole TRANSFER le tre regolazioni indipendenti dei supporti di appoggio, rivestiti in materiale antiscivolo. Tutti gli adattamenti sono attivati tramite una semplice leva o un pulsante.

Codice articolo	Descrizione
BA TRASEVASG	Sedia imbottita girevole da vasca TRANSFER