

DEMETRA

Carrozzina pieghevole ad autospinta

Demetra è una carrozzina pieghevole progettata per l'**autospinta**, realizzata con un robusto telaio in alluminio dalla forma circolare e struttura a doppia crociera. Disponibile in misure da 38 a 60 cm, è ideale per un uso quotidiano intensivo. Progettata per la facilità di manovra, ha un telaio in lega leggera e resistente, ruote posteriori a sgancio rapido regolabili in altezza e posizione, e ruote anteriori fisse regolabili. Poggiagambe ribaltabili e pedane regolabili offrono comfort personalizzato. Dotata di fiancate con braccioli regolabili e ribaltabili, ruotine di transito per spazi stretti, freni di stazionamento e **anti-ribaltamento** regolabili, la seduta e lo schienale di Demetra sono adattabili per una postura corretta e confortevole.



La leggerezza incontra il comfort,
regalandoti la libertà di vivere senza limiti

LEGGEREZZA

Un design innovativo e materiali leggeri rendono questa carrozzina sorprendentemente facile da manovrare, perfetta per un utilizzo quotidiano.

REGOLAZIONE VERSATILE

Con molteplici opzioni di regolazione, dai braccioli, alle ruote, alla seduta, offre un'esperienza su misura adattabile a qualsiasi esigenza e corporatura.

ADATTABILITÀ UNICA

Con una personalizzazione estrema che include l'allungamento in altezza dello schienale e la regolazione della seduta fino a 10 cm in avanti, questa carrozzina assicura un comfort e un supporto senza pari.

CHIUSURA COMPATTA

La doppia crociera alta permette una chiusura totale e compatta, adatta per essere riposta facilmente dietro al sedile dell'auto, anche con le pedane montate.





■ **RUOTA ANTERIORE
PIROETTANTE**

Ruote anteriori \varnothing 200 mm con forcelle piroettanti, regolabili in altezza e inclinazione




■ **RUOTA DI TRANSITO**

Ruota di transito per movimentazione con ruote posteriori estratte



■ **RUOTINA
ANTIRIBALTAMENTO**

Ruotine antiribaltamento regolabili

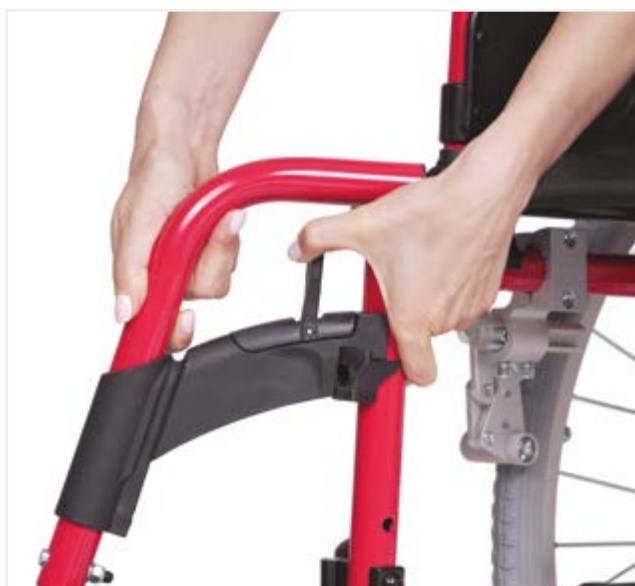


■ **POGGIAGAMBE RIBALTABILI ED ESTRAIBILI**

Sistema per l'estrazione delle pedane poggiatesta, con funzionalità di ribaltamento



■ **PEDANE POGGIPIEDI SEPARATE E
REGOLABILI**

Poggiatesta separati ribaltabili dotati di fermatalloni e regolabili in altezza

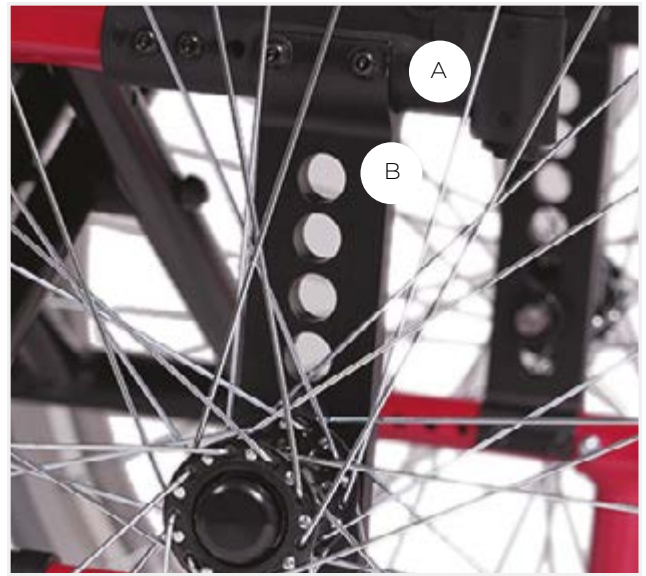

■ RUOTA POSTERIORE ESTRAIBILE E REGOLABILE

Ruote posteriori piene ad estrazione rapida, \varnothing 600 mm. Dotate di freno di stazionamento e di anello corrimano per spinta. Regolabile in 7 posizioni in verticale (A) e in 4 posizioni anteroposteriori (B)



■ BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA, RIBALTABILI ED ESTRAIBILI

Disinnestabili a 45°, con fiancate proteggi abiti integrate.



■ SCHIENALE TENSIONABILE

Offre un supporto ergonomico e personalizzabile. Ideale per migliorare il comfort e la postura, si adatta facilmente a diverse esigenze e corporature



■ SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA

Permette di adattare lo schienale alle specifiche necessità ergonomiche dell'utilizzatore. Ideale per diverse stature e necessità posturali



■ SEDUTA REGOLABILE



Altamente personalizzabile e dotata di un sistema di regolazione con velcro, consente un facile e rapido adattamento della seduta alle dimensioni e alle esigenze specifiche dell'utente. L'imbottitura e il telo sono removibili per una facile e veloce pulizia.



■ PEDANE ELEVABILI (OPTIONAL)

Per il sostegno delle gambe, favoriscono la circolazione e il comfort, evitando problemi legati all'uso prolungato.



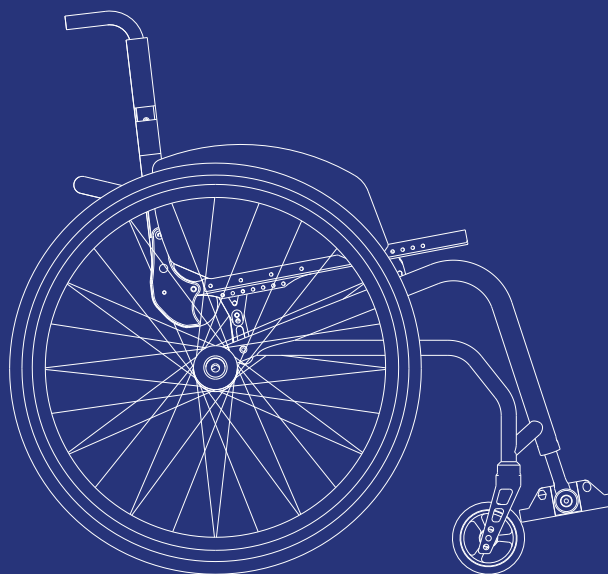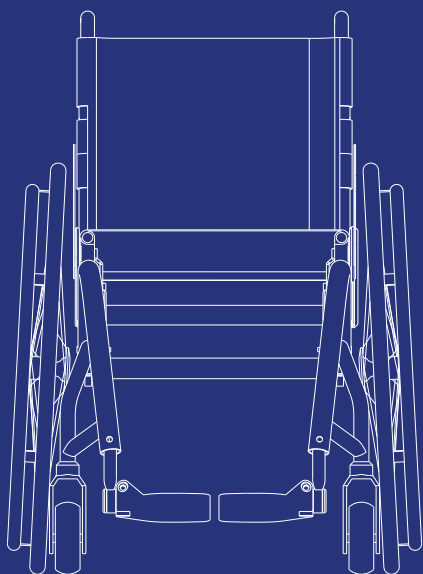

DEMETRA

Modello	38	40	42	44	46	48	50	55	60
Lunghezza (mm)	1000								
Larghezza con ruote posteriori (mm)	590	610	630	650	670	690	710	760	810
Larghezza senza ruote posteriori (mm)	570	590	610	630	650	670	690	740	790
Larghezza ripiegata (con ruote) (mm)	320								
Larghezza ripiegata (ruote estratte) (mm)	200								
Altezza (mm)	975								
Altezza della seduta da terra (min-max) (mm)	min 370 con ruota da 500 mm (20") e rotine di transito rimosse max 540 con ruota da 600 mm (24")								
Altezza dei braccioli dalla seduta (min-max) (mm)	240 - 310 passo 10								
Profondità seduta (mm)	(4 misure) 420 - 435 - 450 - 465								
Larghezza seduta	380	400	420	440	460	480	500	550	600
Materiale telaio	Tubolare in alluminio verniciato a sezione circolare								
Peso (kg)	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.9	17.2
Portata (kg)	170								
Ruote anteriori e posteriori	Piene, in gomma								
Ø Ruote posteriori (mm) / (")	600 / 24								
Ø Ruote anteriori (mm) / (")	200 / 8								

* I pesi indicati si riferiscono alla configurazione standard offerta da Antano Group, che include una serie di accessori di qualità. Tra questi, troviamo le rotine per passaggi stretti, il sistema antiribaltamento per una maggiore sicurezza, fianchetti regolabili in altezza per un adattamento personalizzato e uno schienale pretensionabile. Inoltre, è inclusa una ruota piena.