

DATA DI STAMPA: Lunedì, 24 Giugno 2024



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE [www.chinesport.it/go/01326/](http://www.chinesport.it/go/01326/)

### 01326 PARALLELA PLUS 3M

È un sistema di barre parallele di **3 m di lunghezza** per l'esercizio di un'attività fisica-riabilitativa, costituito da una struttura in acciaio verniciato e da una pedana in legno bilaminato, antiusura e dotata di rampe d'accesso. I corrimano sono in termoplastica antiscivolo e la loro distanza è regolabile. Tutte le parti sono facilmente lavabili. L'altezza dei corrimani è variabile da **74 a 102 cm**, quindi adatta per soggetti **adulti**.

Queste barre parallele sono regolabili in altezza con l'innovativo "STandGoSystem™" che consente un adattamento immediato alla corporatura dell'utente, sia adulto che bambino. L'altezza dei corrimano può essere anche modificata durante l'esecuzione dell'attività riabilitativa.

Possono essere utilizzati sulla pedana dei moduli in termoplastica oppure dei sacchetti per lo svolgimento di specifici percorsi terapeutico-riabilitativi.

La modularità consente di realizzare, con gli art. cod. 01325 e cod. 01326, sistemi di barre parallele della lunghezza desiderata smontando le rampe d'accesso dal lato dell'abbinamento.



01326 - PARALLELA PLUS 3M - con l'innovativo STandGo System

#### AVVISO!

È possibile richiedere una personalizzazione del colore per i corrimani, e la pedana di deambulazione in caso di ordine di quantità. In foto Gallery è disponibile immagine dei corrimani e pedana in colore bianco.


## Specifiche tecniche e dimensioni

Dimensioni max (cm) :	311 x 81 x 108 h
Sistema di regolazione altezza corrimani :	doppia molla a gas
Altezza corrimani min - max (cm) :	74 ÷ 102
Sistema di regolazione larghezza corrimani :	manuale, 3 posizioni
Regolazione larghezza corrimani (cm) :	55 ÷ 71
Portata su singolo corrimano (kg) :	135
Modularità (abbinamento di più parallele) :	rampa removibile
Peso (kg) :	99

## Documentazione disponibile online

DICO - Parallele standard e plus Italian	.PDF 1.5 MB
DICO - Parallel bars standard and plus English	.PDF 1.5 MB
IFU - Paralelas estándar y plus Spanish	.PDF 4.67 MB
IFU - Parallel bars standard and plus English	.PDF 4.62 MB
IFU - GÅbarr parallell standard och plus Swedish	.PDF 4.62 MB
IFU - Parallele standard e plus Italian	.PDF 4.63 MB
Dichiarazione di conformità - Dichiarazione di conformità Italian, English, German, French, Spanish	 .PDF 110.12 KB
Manuale istruzioni - Manuale istruzioni Italian, English	 .PDF 1.26 MB
Manuale istruzioni - Mode d'emploi French	 .PDF 503.88 KB
Manuale istruzioni - Manuale istruzioni Italian	 .PDF 581.4 KB
Manuale istruzioni - User and maintenance manual English	 .PDF 282.84 KB

 Il documento è disponibile per il download in area riservata

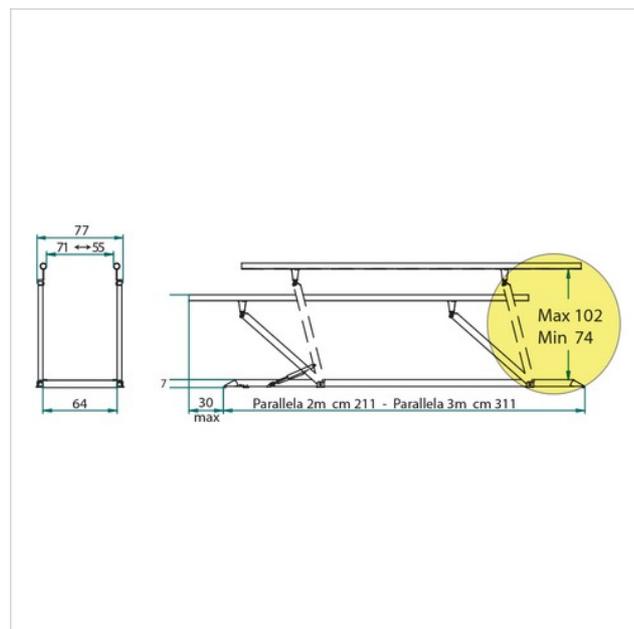

## Accessori



### XYW001 YOWALK PLUS

Tappeto con borsa a libro certificato come dispositivo medico, pensato per la Riattivazione Plantare Progressiva. La riattivazione della circolazione sanguigna è la chiave per generare benefici.



### 01330 OSTACOLO-DIVARICO

Moduli termoplastici utili per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



### 08586 RULLI-SACCHETTI

Moduli in termoplastica testurizzata con rotolo in legno e borsa sensoriale. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



### 08587 SENSORIALI

Moduli sensoriali in termoplastica testurizzata. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



### 08591 CONCAVO-CONVESSO

Moduli termoplastici concavi-convessi. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



### 08589 EMISFERE

Moduli in materiale termoplastico testurizzato con semisfere. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



**01379 SET PERCORSI TERAPICI**

Una serie di moduli in termoplastica e di sacchetti contenenti diversi materiali possono essere utilizzati come accessori per realizzare dei percorsi di deambulazione.



**01335 CARRELLO PORTA PERCORSI**

Carrello porta percorsi per parallele, in acciaio verniciato e si può utilizzare per ogni tipo di moduli (non compresi).



**01380 CARRELLO PER PARALLELE**

Carrello con appoggio antibracchiale applicabile a tutte le parallele. Offre un maggiore sostegno alla persona durante la deambulazione.



**02400 SACCHETTO ANDATURA DA 1 KG**

Sacchetto andatura da 1 kg. Contiene sabbia.



**02410 SACCHETTO ANDATURA DA 2 KG**

Sacchetto andatura da 2 kg. Contiene sabbia.



**02420 SACCHETTO ANDATURA DA 3 KG**

Sacchetto andatura da 3 kg. Contiene sabbia.



**02430 SET 12 SACCHETTI ANDATURA**

Set composto da 12 sacchetti di sabbia di diverso peso e dimensioni



**02500 SACCHETTO MOTORIO DA 0,3 KG**

Sacchetto motorio da 300g. Contiene granuli in PVC.



**02510 SET SACCHETTI MOTORI**

Si compone di 16 sacchetti motori contenenti granuli.




**08585 SET SACCHETTI SENSORIALI**

Si compone di 12 sacchetti contenenti differenti materiali per offrire una diversa sensibilità di appoggio.



**AC0550 BARRA FINE CORSA**

Accessorio di fine corsa e di supporto per agevolare l'utente nell'inversione del senso di deambulazione. Prolunga il percorso terapeutico - riabilitativo.

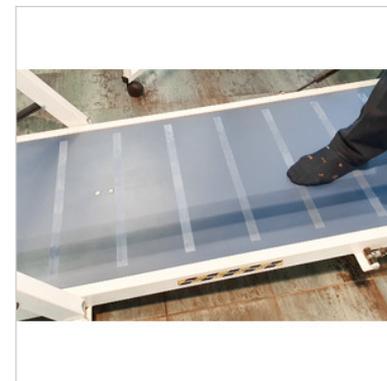

**AC1257 KIT ANTISCIVOLO PARALLELE**

Fasce adesive antiscivolo applicabili alla pedana base di qualunque sistema di parallele. Particolarmente utile nel caso d'utilizzo senza calzature. 16 pezzi.



**AR12101 SOFT PAD**

Cuscino propriocettivo con densità morbida di dimensioni quadrate con spessore 5 cm. Il cuscino è rivestito in similpelle blu con trattamento antibatterico.



**AR12102 MEDIUM PAD**

Cuscino propriocettivo con densità media di dimensioni quadrate con spessore 5 cm. Il cuscino è rivestito in similpelle blu con trattamento antibatterico.



**AR12103 HARD PAD**

Cuscino propriocettivo con densità alta di dimensioni quadrate con spessore 5 cm. Il cuscino è rivestito in similpelle blu con trattamento antibatterico.



**AR12100 SET PADS PROPRIOCETTIVI**

Set di tre cuscini propriocettivi con tre densità diversi: morbida, media e alta. La dimensione è quadrata per tutti e tre con spessore 5 cm. I cuscini sono rivestiti in similpelle blu con trattamento antibatterico.




**AR12104 KIT STRAP**

Set di tre velcro per i cuscini propriocettivi. I velcro sono rivestiti in similpelle blu con trattamento antibatterico. Possono essere applicati su tutti e tre i lati del cuscino.

**Altre immagini dell'articolo**



01326 - PARALLELA PLUS 3M - con l'innovativo STandGo System

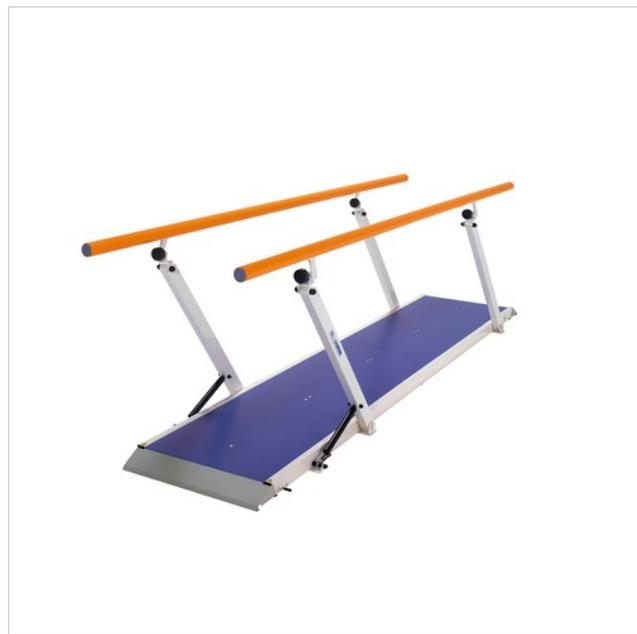

01326 - PARALLELA PLUS 3M



Particolare della regolazione in larghezza del corrimano.



Particolare della regolazione in larghezza del corrimano.

## PARALLELA PLUS 3M

