

DATA DI STAMPA: Venerdì, 25 Ottobre 2024



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE [www.chinesport.it/go/HM3370/](http://www.chinesport.it/go/HM3370/)

## HM3370 BARELLA PACIFIC

### Innovativo sistema di trasferimento e lavaggio del paziente.

È composto da una barella contenuta in una scocca leggera a forma di vasca che permette di trasportare il paziente dalla stanza da letto alla stanza da bagno, in tutta sicurezza, **per il lavaggio tipo doccia o ad immersione nella barella stessa.**

Il sistema consente una doppia regolazione in altezza, elettricamente tramite batteria da 24V, ricaricabile.

Il telaio è in acciaio inox verniciato con polveri epossidiche antigraffio ed anticorrosione, 4 ruote antitraccia piroettanti dotate di freno e con sistema unidirezionale.

L'esterno della vasca-barella è composto da una scocca in ABS con fascia perimetrale in gomma antiurto, dotata di due grandi maniglioni ergonomici per la spinta.

L'interno è in poliuretano imbottito a garanzia del massimo comfort, igiene e resistenza all'usura ed agli strappi.

L'altezza del telaio da terra consente l'utilizzo combinato con sollevatori. Cuscino cervicale non incluso.




HM3370 - BARELLA PACIFIC



200 KG

## Specifiche tecniche e dimensioni

Dimensioni totali :	216,5 x 77,5 x 60 ÷ 115,5 h cm
Dimensioni vasca :	182,5 x 48 x 18/21 h cm
Altezza da terra min / max :	55 ÷ 110 cm
Altezza max piattaforma di sollevamento del paziente :	90 cm
Peso :	100 kg
Portata max di sicurezza :	200 kg (incluso peso paziente, accessori e acqua)
Batterie ricaricabili :	2 x 12 V - 2,9 Ah
Alimentazione caricabatteria :	110 o 240 V c.a. - 50-60 Hz
Tempo di carica della batteria :	6 ore (max)
N. di cicli di carico completi :	30
Tempo sollevamento/abbassamento piattaforma :	30 s
Tempo sollevamento/abbassamento lati vasca :	30 s

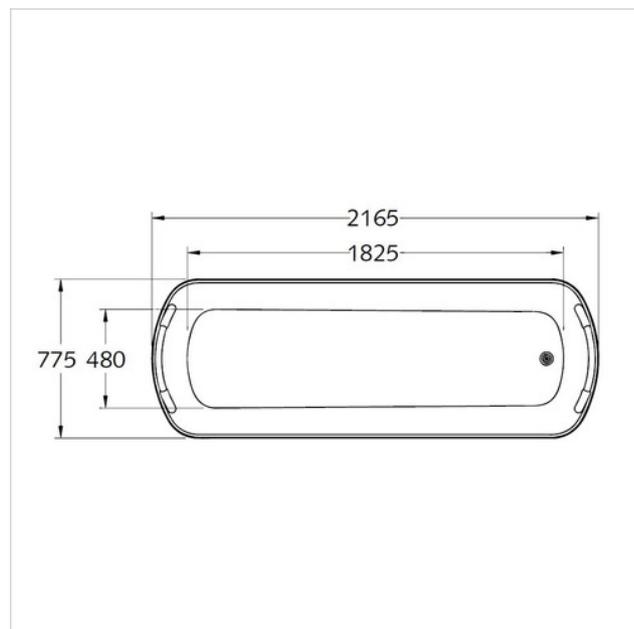


## Documentazione disponibile online

**Manuale istruzioni** - Manuale utente  .PDF 21.35 MB  
English, Italian

**Dichiarazione di conformità** - Declaration of  
conformity  .PDF 1002.79 KB  
English

**Approfondimenti** - Approfondimenti  .PDF 91.01 KB  
Italian

 Il documento è disponibile per il download in area riservata

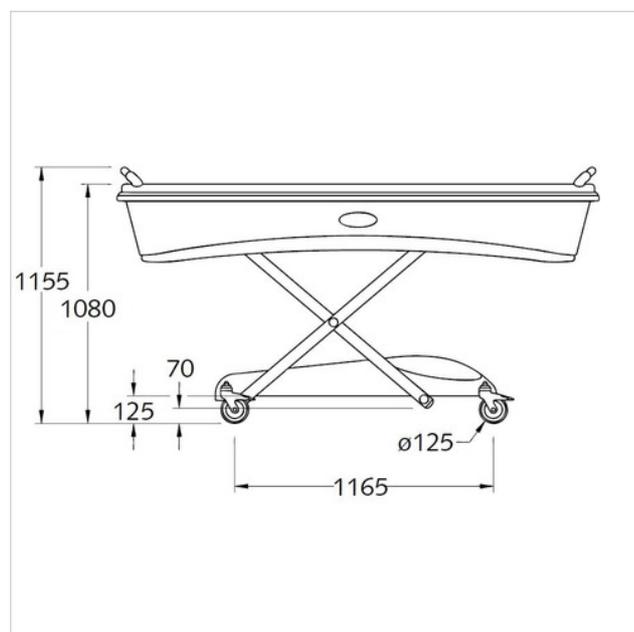

## Accessori




### XBC001 PANNELLO DOCCIA TR 2810

Pannello doccia/sanificazione provvisto di valvole rompi vuoto per lo svuotamento completo dell'impianto, sistema di sanificazione integrato e miscelatore termoscopico con regolazione automatica dell'acqua.

**Altre immagini dell'articolo**



HM3370 - BARELLA PACIFIC

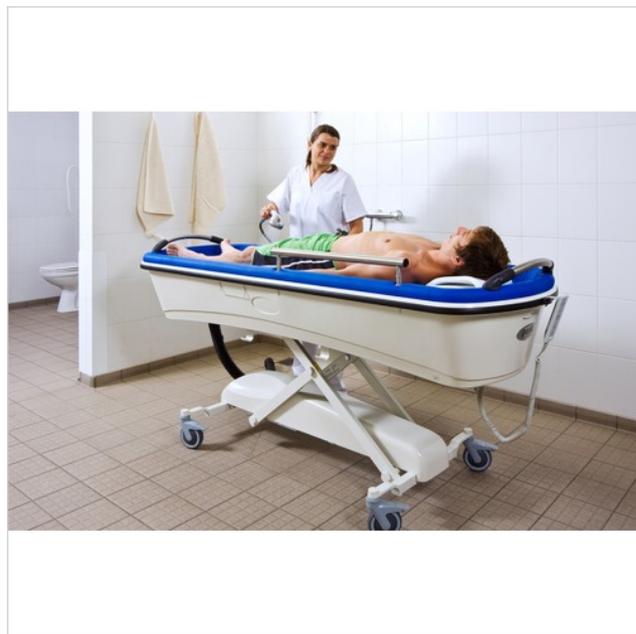

Lavaggio paziente a doccia



Lavaggio paziente ad immersione (bagno)

Altre immagini tecniche dell'articolo

