

DATA DI STAMPA: Giovedì, 27 Giugno 2024



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/XEM040/

XEM040 ERGOMETRO RELAX 900 MED

La linea MOTION offre una gamma di ergometri professionali, con cui è possibile allestire un'unità riabilitativa completa. Tutte le macchine funzionano indipendentemente dalla rete elettrica consentendo così notevoli risparmi. I dispositivi della Linea 900 MED offrono soluzioni meccaniche e una console innovativa per le esigenze di lavoro più avanzate.

Ergometro con comoda posizione seduta che lo rende adatto a sessioni di allenamento particolarmente lunghe o ai pazienti più robusti.

Caratteristiche:

- Funzionamento indipendente dalla rete elettrica
- Console di comando con display touch screen a colori da 7"
- Seduta regolabile orizzontalmente con scala graduata e schienale inclinabile su tre posizioni
- Maniglie di serie
- Rotelle da trasporto incluse

Console

Il computer della linea Motion 900 med dispone di un display touch screen a colori da 7" per una visualizzazione avanzata dei parametri e di un menù di navigazione semplice e chiaro. Un ricevitore integrato ibrido 5kHz/Bluetooth consente una identificazione rapida e senza interferenze del segnale della fascia cardio.

- 10 lingue impostabili.
- 3 programmi: Quick Start, Watt e Pulsazioni.


Il collegamento con altri dispositivi medici (ECG, spirometria,...) è possibile tramite software opzionale.



Specifiche tecniche e dimensioni

Dimensioni :	173 x 65 x 133 h cm
Peso :	80 kg
Portata max :	150 kg
Resistenza :	15 ÷ 500 W, 15 ÷ 140 giri/min
Trazione :	a cinghia unica
Accesso :	facilitato
Sellino :	regolabile in profondità
Display LCD :	touch screen a colori da 7"
Ricevitore pulsazioni integrato :	sì
Piedini :	regolabili
Conformità :	DIN EN ISO 20957-1/5 S-A-I, DIN EN 60601-1 e 93/42/CEE

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - Dichiarazione ce  .PDF 90.23 KB
Italian, English

 Il documento è disponibile per il download in area riservata

Accessori



XEM042 PACCHETTO PERFORMANCE

Estende la resistenza massima a 950 watt (cycle e relax) o 550 watt (body). Consente la ricarica wireless di altri device tramite tecnologia Qi. Tecnologia ANT+ per l'impegno delle fasce Garmin e Polar Verty Sense.




XEM043 PACCHETTO PROGRAMMI EXTRA

Aggiunge 7 programmi alla dotazione standard (cycle, relax, body). Sistema di valutazione della simmetria e 3 giochi (cycle e relax). 6 test di valutazione - IPN, Conconi, Lattato... - (cycle).



XEM044 REGOLAZIONE RAGGIO

Per adattare l'estensione del movimento alla mobilità delle articolazioni (cycle e relax). Regolabile da 55 a 175 mm, senza attrezzi.

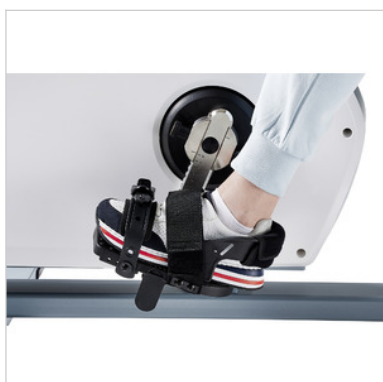

XEM045 SCARPETTA RELAX 900

Le scarpette assicurano il piede al pedale, quando richiesto da limitazioni del movimento (relax).



XEM16 CARDIOFREQUENZIMETRO A FASCIA

Misuratore di frequenza a fascia toracica Polar per programmi di allenamento cardio.

Altre immagini dell'articolo

