

Baja™ Wrangler® 2

ID Modello	BA400
Portata massima	204.1 kg
Velocità massima¹	18.5 km/h a 90.7 kg di carico 16.9 km/h a 204 kg di carico
Altezza dal suolo³	20,95 cm a metà telaio 13,97 cm al motore
Raggio di sterzata³	240,66 cm
Lunghezza totale³	155,57 cm
Larghezza totale³	82,55 cm
Altezza sedile da terra³	73,66-77,47 cm
Altezza sedile da pianale³	52,7-13,25 cm
Ruote anteriori³	14.5" pneumatiche
Ruote posteriori³	14.5" pneumatiche
Sospensioni	Anteriori e posteriori (CTS Sospensioni)
Autonomia per carica^{1,2}	34.5 km a 90.7 kg di carico 27.8 km a 204.1 kg di carico
Peso totale⁵	124.3 kg
Sedile Standard³	Schienale alto in vinile nero con sedile in memory foam a reclinazione limitata con cursori Peso: 22.1 kg Dimensioni: 46-50 cm
Sistema di guida	Motori in linea doppi a 24 volt CC, trazione posteriore
Sistema Frenante	Rigenerativo ed elettromeccanico
Batterie^{4,6}	(2) 100 AH ⁷ Peso: 27.4 kg
Caricabatterie	8-amp, esterno

1. Varia in base al peso dell'utente, al tipo di terreno, agli ampere-ora della batteria (AH), alla carica della batteria, condizione della batteria e condizione degli pneumatici. Questa specifica può essere soggetta a una variazione del (+ o -) 10%.

2. Testati in conformità agli standard ANSI/RESNA, MC Vol2, Sezione 4 e ISO 7176-4. Risultati derivati da calcoli teorici basati sulle specifiche della batteria e sulle prestazioni del sistema di azionamento. Test condotto alla massima capacità di peso.

3. A causa delle tolleranze di produzione e del continuo miglioramento del prodotto, questa specifica può variare del (+ o -) 3%.

4. Il peso della batteria può variare a seconda del produttore. Include sedile e batterie standard.

5. È richiesto un tipo di batteria AGM o al gel.

6. Opzionale.

PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS ITALIA S.R.L.
LIVE YOUR BEST[®]

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso ang. Via del Lavoro -
00065 Fiano Romano(RM)
Tel. +39 (0765) 45.11.43 -
Mail info@pride-italia.it

BAJA[™] **MOBILITY**

NOTA: Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni contenute nel presente documento sono corrette al momento della pubblicazione; ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. La velocità e l'autonomia variano in base al peso dell'utente, al tipo di terreno, alla carica della batteria, alle sue condizioni e alla pressione dei pneumatici. A causa delle tolleranze di produzione e dei continui miglioramenti del prodotto, la lunghezza, la larghezza, il raggio di sterzata e l'altezza da terra possono variare di + o - 3%. I sedili ordinati in modo speciale o di dimensioni non standard non sono pieghevoli e regolabili in profondità.

CA_BajaWrangler2_010224



LO SPIRITO DELL'AVVENTURA

Sedile in vinile nero da 45,72 cm x 45,72/50 cm a reclinazione limitata in memory foam con regolazione manuale, montante del sedile per impieghi gravosi, cursori e braccioli regolabili in altezza, larghezza, profondità e angolazione e cintura addominale da 152 cm.

Sostegno per carichi pesanti

senso di backup con luci a LED




Sospensioni CTS Pride e sistema di smorzamento dello sterzo aggiuntivo per un maggiore comfort

Robusto e costruito per durare, il BajaTM Wrangler® 2 è tutto ciò che desiderate in uno scooter per esterni. Dotato di sospensioni anteriori e posteriori, questo scooter aggressivo è progettato per percorrere i sentieri o per girare intorno alla vostra proprietà. Rendete leggendarie le vostre avventure con il BajaTM Wrangler® 2!

Caratteristiche

- La Sospensioni CTS comprendono sospensioni anteriori e posteriori all'avanguardia per una guida più fluida.
- Il sistema di smorzamento dello sterzo assorbe i movimenti incontrollati su terreni accidentati, limita l'affaticamento e riduce l'energia necessaria per controllare il manubrio
- Sedile in vinile nero a reclinazione limitata in memory foam con regolazione manuale, montante del sedile per impieghi gravosi, cursori e braccioli regolabili in altezza, larghezza, profondità e angolazione e cintura addominale da 152,4 cm
- La console a LED di facile utilizzo con controllo della velocità variabile, visualizza l'ora, la temperatura, i chilometri percorsi e i percorsi effettuati, oltre ai pulsanti del clacson e delle luci.
- Manubrio ergonomico regolabile con impugnature avvolgenti e porta di ricarica XLR
- Caricatore USB per la ricarica di dispositivi portatili
- Punti di fissaggio facilmente accessibili (per il trasporto dello scooter senza occupante)
- Pacchetto di illuminazione a LED completo che include fari, luci di emergenza e segnali direzionali
- Le luci LED del sensore di backup posteriore segnalano quando si è troppo vicini a un oggetto durante la retromarcia
- Freno a mano idraulico con sistema di frenata rigenerativo ed elettromeccanico di serie
- Facile installazione della batteria

Colori

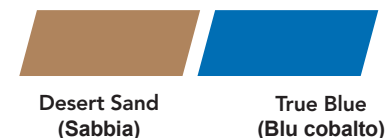

Accessori

- Supporto per bastone e stampella
- Cintura addominale 127/177,80 cm (50/70")
- Portabicchieri
- Porta cellulare
- Porta stampella per avambracci
- Cestino anteriore
- Specchietto retrovisore aggiuntivo



Sensore di backup con luci LED



Console di facile utilizzo



Fari anteriori