

Club



VERMEIREN
we care for you

Club Family


Una serie di letti che deriva da più di 65 anni di esperienza nel settore dei dispositivi per assistenza domiciliare. La famiglia di letti Club di **VERMEIREN** è progettata sulla base del contributo di utenti e operatori sanitari. Un letto a quattro sezioni semplice e sicuro per offrire il massimo del comfort e della cura a casa.

Regolare il posizionamento elettricamente per tutti i letti Club dotati di serie tre motori Linak™. La regolazione elettrica dell'altezza facilita sia l'utente che l'operatore sanitario per le cure e i trasferimenti.

La posizione (anti) Trendelenburg è standard ed inclusa per maggiore comfort e sicurezza.



Il telecomando è facile da usare sia per l'operatore sanitario che l'utente, ma può essere bloccato per una maggiore sicurezza.

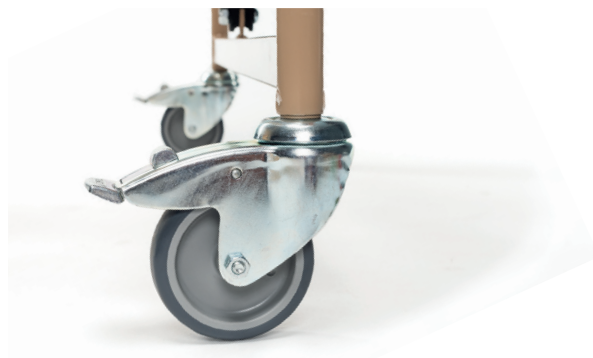


Tutte le 4 ruote possono essere bloccate per sicurezza e consentono manovre facili.

Club VARIO

Club Vario è il letto regolabile in altezza della famiglia Club. In aggiunta agli altri vantaggi dei letti Club, l'altezza può essere regolata in due posizioni.

Imposta l'altezza più adatta alla tua situazione e regolala successivamente elettricamente, per soddisfare diverse necessità nella giornata.

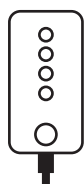

81 cm
74,5 cm
40 cm
33,5 cm

Posizione 1: 33,5 cm (regolabile elettricamente fino a 74,5 cm)

Posizione 2: 40 cm (regolabile elettricamente fino a 81 cm)

Club

Per garantirti il miglior comfort, il letto Club è stato progettato con molte opzioni di configurazione. Dalla rete a doghe ai rivestimenti di finitura.

SCOPRI DI PIÙ sulle caratteristiche del letto Club qui di seguito.



Rete a doghe




Doghe in metallo




Doghe in legno

Cremagliera opzionale

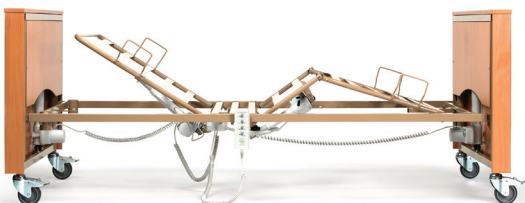

Senza cremagliera

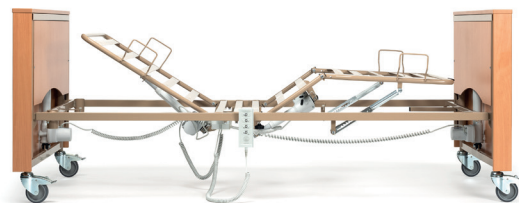

Con cremagliera

Sponde laterali



Sponde laterali in metallo



Sponde laterali divise (in legno o metallo)



Sponde laterali in legno

Pannelli di copertura testiera e pediera in legno

Dai al tuo letto Club un aspetto moderno aggiungendo pannelli di copertura in legno.




Opzioni

Abbiamo selezionato per te le migliori opzioni dei letti **Club**. Scopritele qui.



L'asta sollevamalati aggiunge ulteriore supporto, in modo che l'utente possa sollevarsi o riposizionarsi autonomamente.

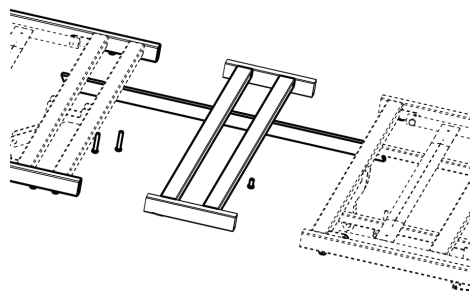

I letti Club sono creati per adattarsi alle esigenze di ogni utente! Aggiungili facilmente 20 cm. di lunghezza al tuo letto Club grazie all'estensione della rete (opzionale).



Asta portafflebo



Kit da trasporto

Le configurazioni possono variare a seconda del Paese. Si prega di consultare i nostri moduli d'ordine per le informazioni più aggiornate riguardo alle varie possibilità di configurazione.

Prodotti pensati per te

VERMEIREN cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Stiamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Club** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

Dati tecnici

■ Larghezza	1005; 1037 mm
■ Altezza (senza staffa di sollevamento)	834 - 1262 mm
■ Lunghezza	2125; 2175 mm
■ Superficie d'appoggio regolabile in altezza*	400 - 810 mm
■ Regolazione massima dello schienale	69°
■ Regolazione massima delle montante superiore	20,7°

■ Regolazione massima delle montante inferiore	-16,5°
■ Materasso	RG 35, 120 mm spessore, 2000x900 mm
■ Staffa di sollevamento	Carico nominale 80 kg
■ Peso	60,8 kg; 62 kg
■ Peso massimo dell'utente	165 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

* Club Vario pos.2. Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate MI
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.