



Piattaforma multifunzione digitale

- Piattaforma larga e facilmente accessibile, ideale per la pesatura di pazienti in carrozzina
- Seduta integrata nel corrimano
- Doppia rampa per salita e discesa di carrozzine e pazienti in piedi



WU150 - Standard pag. 7

Peso, tara, blocco del peso, BMI (indice massa corporea), azzeramento automatico, autoOff programmabile

Struttura

Grande robusta piattaforma con nervature tubolari in metallo verniciato. Visore in ABS con supporto orientabile. 2 ruote e maniglia trasporto. Sedia pieghevole integrata.

Dimensioni

Totale W900 x D1150x H1100mm

Piattaforma W800 x D1150 x H70mm

Alimentazione

Alimentatore esterno e vano batterie alcaline 6 x AAA (batterie non incluse) o kit batteria ricaricabile durata 40h (optional)

Omologazioni

Direttiva metrica NAWI 90/384-2014/31/UE

Classe di precisione III secondo la norma EN45501


Dispositivi medici MDR Regolamento UE 2017/745

Classe di rischio Im con funzione di misura

Packaging

1 pz dimensioni W930 x D1280 x H190mm

Peso: netto 36,5kg - lordo 42,5kg

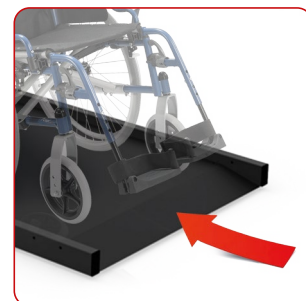

Rampa di facile accesso alle carrozzine

CND: V0399 - Repertorio: 2516904

Modello	Codice	Portata	Divisione	Piano pesata
RW2.0 SEDIA	00092RB	300kg	100g	W740 x D900mm
RW2.0 SEDIA	00092SB	400kg	200g	

Accessori inclusi: alimentatore, RS232, livella, piedini regolabili, doppia rampa, sedia pieghevole, garanzia 2 anni

Optional	Codice	Servizi Optional	Codice
Software wMed Basic	000WMEDB	Omologazione	AOMOL
Batterie ricaricabili durata 40h	BAME01	Certificato prove elettriche	APREL
WS stampante termica (pag. 94)	01131T	Certificato di taratura con pesi Accredia	ACOSITMD
Bluetooth	01137NBT	Certificato di taratura LAT Accredia	ACOLAT2
Wifi	01137NWIFI	Estensione garanzia 5 anni	AGAES
Colore piattaforma		Verifica periodica 3 anni	AOPER1





WU150 - Standard



con R2020, RA, RB, RH, RW, DE, PS20, RW-XL, RL

Questa è la configurazione che viene applicata per tutte le pesapersone che hanno un utilizzo generico in ambito medicale.










Il design della tastiera e le funzioni sono state studiate per poter coprire tutte le necessità dell'operatore che le utilizza, rendendo l'esperienza con il sistema WU150 user friendly.

Visore ØW215 x D180mm, in ABS a doppio LCD a tripla lettura

1° Display LCD Peso a 5 cifre 20mm

2° Display LCD Altezza/BMI multiriga a 3 cifre 12mm

Funzioni

- | | |
|--|---|
| <p> ON/OFF
Tasto di accensione e spegnimento.
Tenendo premuto per 3 secondi si spegne la bilancia.</p> <p> Zero
Azzeramento dell'indicazione del peso (entro il $\pm 2\%$ della portata).</p> <p> Tara
Permette di effettuare la tara.</p> <p> Hold
Permette di bloccare il peso del paziente (nel caso abbia difficoltà a stare fermo) e tenere fissa l'ultima pesata.</p> | <p> Cancella
Permette di cancellare cifre errate durante l'immissione dei dati personali.</p> <p> Esportazione
Esporta i risultati a PC o stampante termica.</p> <p> BMI
Permette di calcolare il BMI o IMC del paziente</p> <p> Unità di misura
Permette di cambiare da un'unità di misura all'altra.</p> <p> Pretara
Permette di memorizzare un valore di tara impostando manualmente il dato da sottrarre (es. vestiti, carrozzina).</p> |
|--|---|