


## Barre pesatrici multifunzione digitali

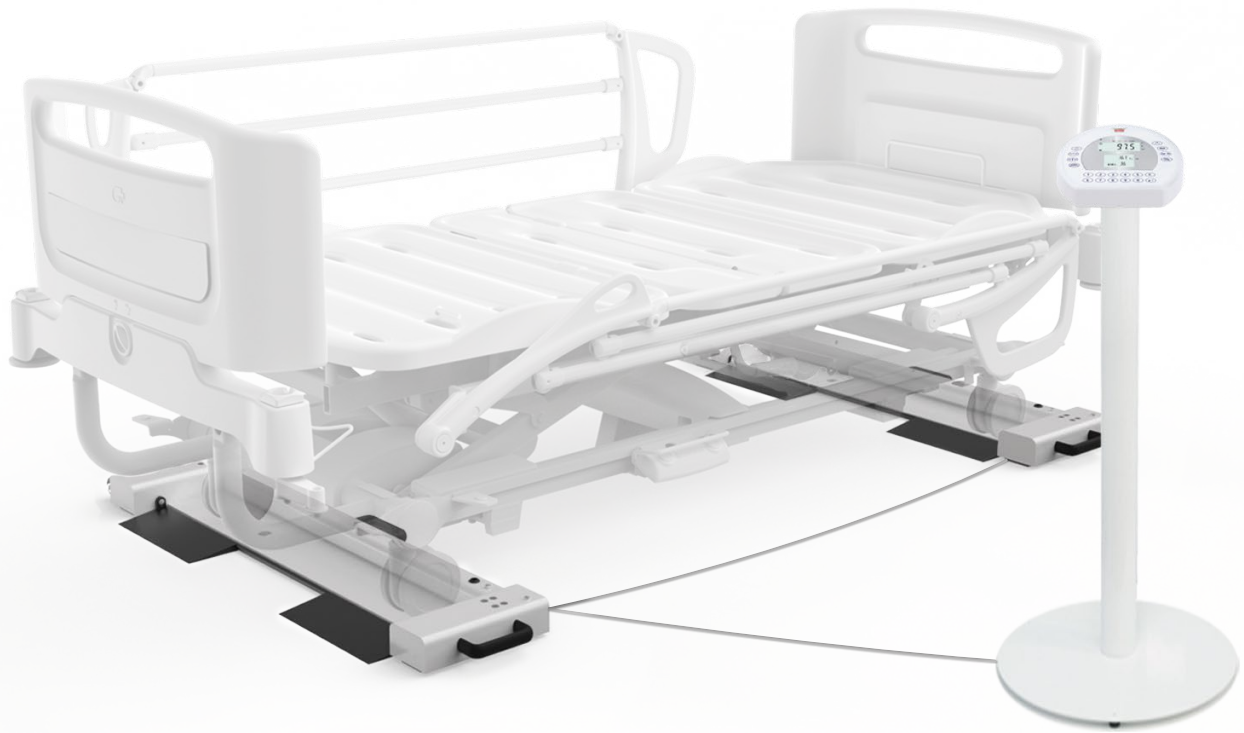

- Soluzione portatile utilizzabile nei diversi reparti
- La struttura robusta rende la RL uno strumento affidabile e durevole
- Sistema versatile, ideale per la pesatura di letti e barelle di diverse dimensioni
- Permette di evitare lo spreco inutile di spazio

**WU150 - Care / LED**

Peso, tara, hold, BMI (indice massa corporea), autozero, Check Weighing, standby

**Omologazioni**

Direttiva metrica NAWI 90/384-2014/31/UE  
Classe di precisione III secondo la norma EN45501  
Dispositivi medici MDR Regolamento UE 2017/745  
Classe di rischio Im con funzione di misura

**Struttura**


Struttura in metallo verniciato con due ruote per il trasporto. Completo di stand display ad inclinazione regolabile (optional) Le barre pesatrici sono collegate a cavo

**Dimensioni**

1 pcs W1180 x D270 x H70 mm

**Alimentazione**

Alimentatore esterno e vano batterie alcaline 6 x AAA (batterie non incluse) o kit batteria ricaricabile durata 40h (optional)

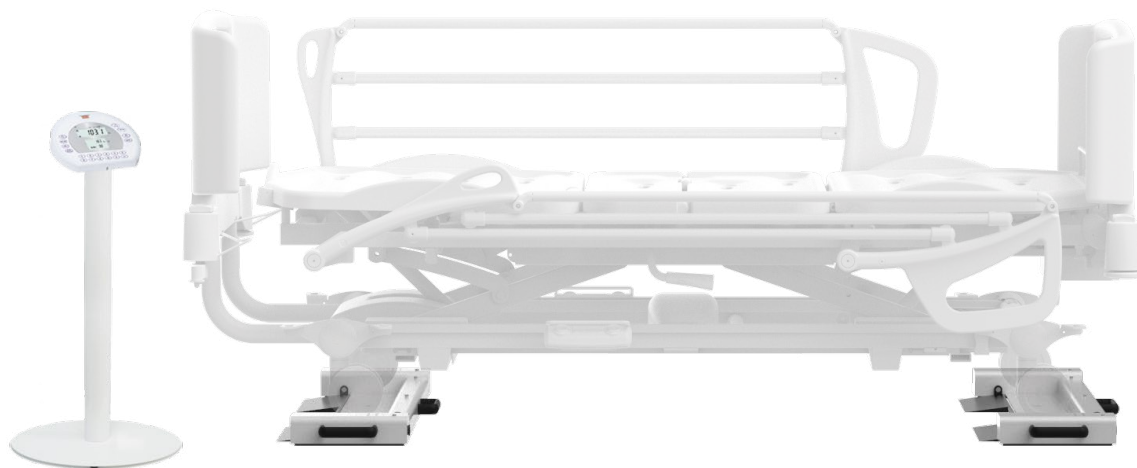


### Distanza variabile

Le due barre pesatrici si possono posizionare in base alla distanza tra le ruote del letto/barella che si vuole misurare



### Design funzionale

Le due rampe nere facilitano il posizionamento della barella o letto da pesare sulla bilancia. Quando non in uso, le due rampe si possono ripiegare per facilitare il trasporto

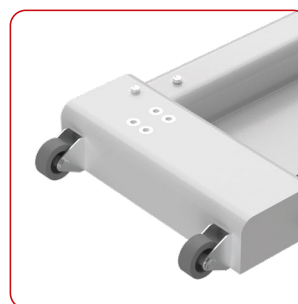

### Ruote integrate

Le due ruote alla base delle RL ne semplificano il trasporto e assistono l'operatore durante la fase di disposizione dell'apparecchiatura



### Presca comoda

Le maniglie della RL sono state studiate per fornire una presa confortevole

CND: V0399 - Repertorio: 2497354

Modello	Codice	Portata	Divisione	Piano Pesata mm
RL	00094	300kg	100g	W130 x D880
RL	00094A	400kg	200g	W130 x D880

Accessori inclusi: alimentatore, RS232, livella, ruote e maniglia, garanzia 2 anni

Optional	Codice	Servizi Optional	Codice
Software wMed Basic	000WMEDB	Omologazione	AOMOL
Batterie ricaricabili durata 40h	BAME01	Certificato prove elettriche	APREL
WS stampante termica	01131T	Certificato di taratura con pesi Accredia	ACOSITMD
Bluetooth	01137NBT	Certificato di taratura LAT Accredia	ACOLAT2
Wifi	01137NWIFI	Estensione Garanzia 5 anni	AGAES
Display Stand	00092C	Verifica periodica 3 anni	AOPER1



## WU150 - Care



con RW-XL, RL, PL-VEGA, PL-AP4300

Questa è la configurazione che viene applicata per tutti i prodotti destinati ai reparti di degenza, nefrologia, dialisi, e terapia sub intensiva.

Il design della tastiera e le funzioni sono state studiate con lo scopo di fornire i dati necessari all'operatore.

Visore ø W215 x D180, in ABS a doppio LCD a tripla lettura

1° Display LCD Peso a 5 cifre 20mm

2° Display LCD Altezza/BMI multiriga a 3 cifre 12mm

## Funzioni



### ON/OFF

Tasto di accensione e spegnimento.  
Tenendo premuto per 3 secondi si spegne la bilancia.



### Zero

Azzeramento dell'indicazione del peso (entro il  $\pm 2\%$  della portata).



### Tara

Permette di effettuare la tara.



### Check Weighing

Attivazione e disattivazione del controllo del peso.



### Differenza

Permette la registrazione del peso iniziale e del peso finale e calcola la differenza.



### Esportazione

Esporta i risultati a PC o stampante termica.



### BMI

Permette di calcolare il BMI o IMC del paziente.



### Unità di misura

Permette di cambiare da un'unità di misura all'altra.



### Standby

Blocco temporaneo della misurazione per l'aggiunta o la rimozione di oggetti dal letto e poltrona.



## WU150 - LED



con RL, PL-VEGA, PL-AP4300

Questa è la configurazione che viene applicata per tutti i prodotti destinati ai reparti di degenza, nefrologia, dialisi, e terapia sub intensiva.

Il design della tastiera e le funzioni sono state studiate con lo scopo di fornire i dati necessari all'operatore.

Visore  $\varnothing$  W215 x D180, in abs a LED rossi

Visore grandi LED rossi a 5 cifre 30mm

## Funzioni



### ON/OFF e Zero

Tasto di accensione. Premuto per 3 secondi spegne la bilancia. Azzeramento dell'indicazione del peso (entro il  $\pm 2\%$  della portata).



### Check Weighing

Attivazione e disattivazione del controllo del peso.



### Standby

Blocco temporaneo della misurazione per l'aggiunta o la rimozione di oggetti dal letto e poltrona.



### Tara

Permette di effettuare la tara.



### Stampa

Esporta i risultati a PC o stampante termica.