

Baby 02 Fasciatoio



Pesaneonati elettronica professionale



- Superficie larga e confortevole su cui posare il neonato da pesare
- Sul fasciatoio si misurano peso e altezza in totale sicurezza
- Mobile spazioso con ripiano
- Doppio display facile da leggere con funzione Milk Intake
- Struttura robusta e versatile

WU150 - Baby

Peso, tara, funzione del Milk Intake, blocco del peso, azzeramento, autoOff programmabile

Omologazioni

Direttiva metrica NAWI 90/384-2014/31/UE
Classe di precisione III secondo la norma EN45501
Classe di rischio Im con funzione di misura

Struttura

Struttura interamente costruita in bilaminato plastico, con guarnizioni perimetrali antipolvere. Due ante frontali con maniglie: in acciaio verniciato o gomma morbida per non creare alcun trauma in caso di urto. Materassino (h)3cm in gomma piuma, rivestito in skai ignifugo, lavabile, disinfettabile e antimicotico.

Dimensioni


W910 x D670 x H1330 mm

Alimentazione

Alimentatore esterno e vano batterie alcaline 6 x AAA (batterie non incluse) o kit batteria ricaricabile durata 40h (optional)

Superficie spaziosa

Il fasciatoio è disegnato per massimizzare l'utilizzo dello spazio richiesto da una bilancia pesaneonati. Il piano di pesata può essere utilizzato come superficie per molteplici funzioni e viene complementato dal capiente mobiletto

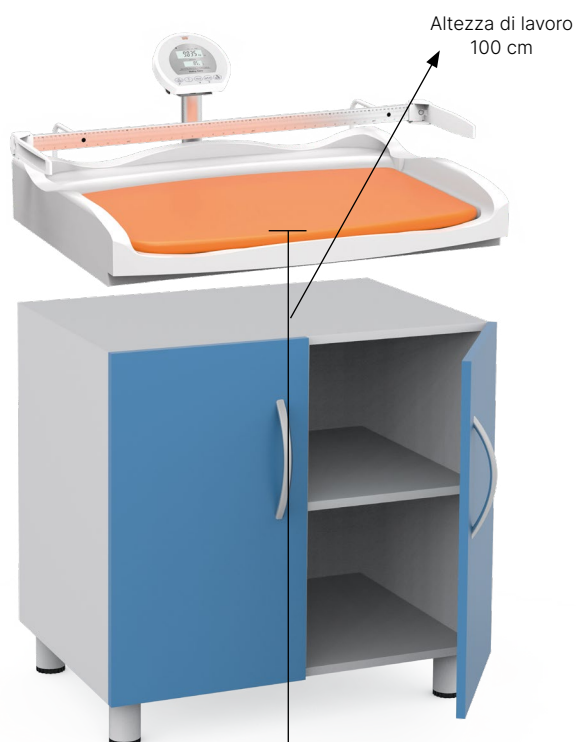

Gamma di colori

Materassino



Maniglie



Ante del mobiletto




La struttura

Offre ampio spazio interno con ripiano regolabile, per collocare tutto il necessario per trattare un neonato



Palette pieghevoli per liberare superficie quando non in uso

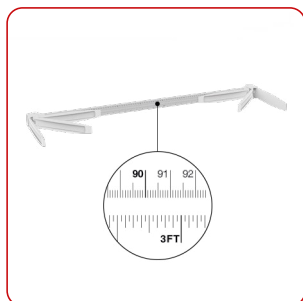

Asta serigrafata ben leggibile misura cm e inches/feet



Visore WU150 reclinabile facilita la lettura dei risultati

Modello	Codice	Portata	Divisione	Piano pesata mm
Baby02 Fasciatoio	004821	6/15kg	2/5g	W930 x D750 x H1330
Baby02 Fasciatoio	004821A	10/20kg	5/10g	W930 x D750 x H1330

Accessori inclusi: alimentatore, RS232, livella, piedini regolabili, garanzia 2 anni

Optional	Codice	Servizi Optional	Codice
Batterie ricaricabili durata 40h	BAME01	Omologazione	AOMOL
WH80 Statimetro 35-80 cm	00060M	Certificato prove elettriche	APREL
WH80D Statimetro digitale 35-80 cm	00060HM	Certificato di taratura con pesi Accredia	ACOSITMD
Bluetooth	01137NBT	Certificato di taratura LAT Accredia	ACOLAT2
Wifi	01137NWIFI	Estensione garanzia 5 anni	AGAES
		Verifica periodica 3 anni	AOPER1



WU150 - Baby



con Baby02 e Fasciatoio

Questa è la configurazione che viene applicata per tutti i prodotti destinati ai reparti di pediatria e neonatologia. Il design della tastiera e le funzioni sono state studiate con lo scopo di fornire i dati necessari all'operatore.

Visore \varnothing W215 x D180, in ABS a doppio LCD a tripla lettura

1° Display Peso grande LCD a 5 cifre 25mm

2° Display PesoMilk differenza tra due pesate

Funzioni



ON/OFF e Zero

Tasto di accensione. Premuto per 3 secondi spegne la bilancia. Azzeramento dell'indicazione del peso (entro il $\pm 2\%$ della portata).



Milk Intake

Funzione del peso Milk: permette di vedere la differenza fra la prima e la seconda pesata.



Hold

Permette di bloccare il peso del neonato e tenere fissa l'ultima pesata.



Tara

Permette di effettuare la tara.



Esportazione

Esporta i risultati a PC o stampante termica.

kg - libbre

Se attivata, permette di cambiare da un'unità di misura all'altra.